

ottobock.

GoOn Orthèse tibio-pédieuse

GoOn, tout simplement!



Pour la qualité de vie

28U70 GoOn

Support léger pour la faiblesse des dorsifléchisseurs

Les patients présentant des problèmes peu sévères aux muscles dorsifléchisseurs trouvent souvent que les orthèses tibio-pédieuses conventionnelles sont trop volumineuses. Ils acceptent difficilement l'appareil, en particulier lorsqu'ils doivent également s'adapter au port de chaussures neuves ou différentes. Heureusement, les patients ont maintenant une option plus discrète, l'orthèse GoOn.

L'orthèse GoOn est une option d'entrée de gamme pour les utilisateurs, qui les aide à se familiariser avec le port d'un appareil ainsi qu'à découvrir les avantages qu'il peut offrir. Cette orthèse tibio-pédieuse aide les utilisateurs à maintenir leur pied dans une position neutre, à marcher de façon plus sécuritaire et à éviter de trébucher. Ils peuvent également porter l'orthèse sans chaussures. Grâce au ressort dorsal de l'appareil, la semelle de la chaussure n'entre jamais en contact avec l'orthèse. Cela permet à l'utilisateur de porter n'importe quelle chaussure lacée et même différentes hauteurs de talon. Le pied est doucement guidé et des filaments à ressort pouvant être ajustés au besoin assurent la stabilité du pied en empêchant les torsions. En revanche, les systèmes similaires utilisant des bandes élastiques simples n'ont pas ce contact direct avec le pied.


Indications

Pour la faiblesse des dorsifléchisseurs causée par :

- Syndrôme de fatigue
- Équilibre précaire
- Démence
- Maladie de Parkinson
- Accident vasculaire cérébral
- Traumatismes crâniens
- Sclérose en plaques
- Atrophie neuromusculaire
- Paralysie péronière

Contre-indications


- Spasticité au bas de la jambe
- Œdème modéré à grave
- Ulcères aux jambes
- Déformations du pied
- Instabilité de l'articulation de la cheville dans la direction M/L
- Instabilité de l'articulation de la cheville dans la direction A/P

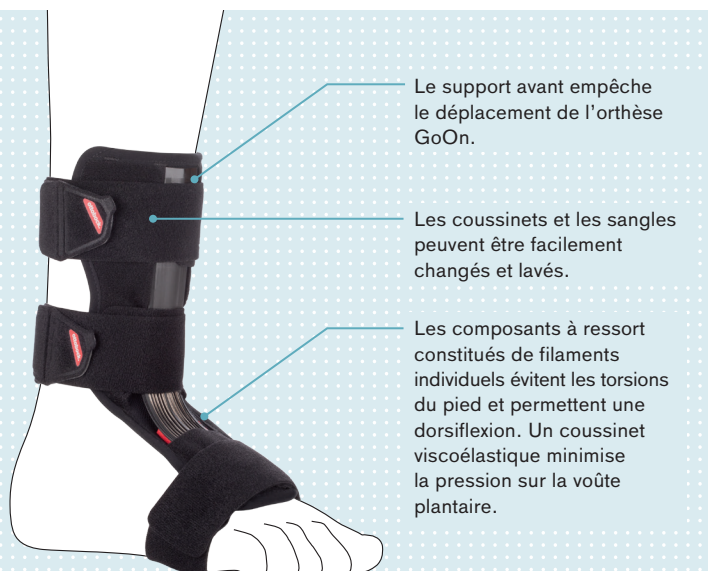


Avantages en un coup d'œil

- Taille universelle
- Niveau d'acceptation élevée de l'utilisateur grâce à son matériau souple et à sa facilité de manipulation
- Peut être portée avec ou sans chaussures, quelle que soit la hauteur du talon
- Attache à Velcro supplémentaire incluse pour une utilisation sans chaussures
- Proprioception accrue avec talon et avant-pied découverts
- Facile à nettoyer

Différenciation de la gamme de produits

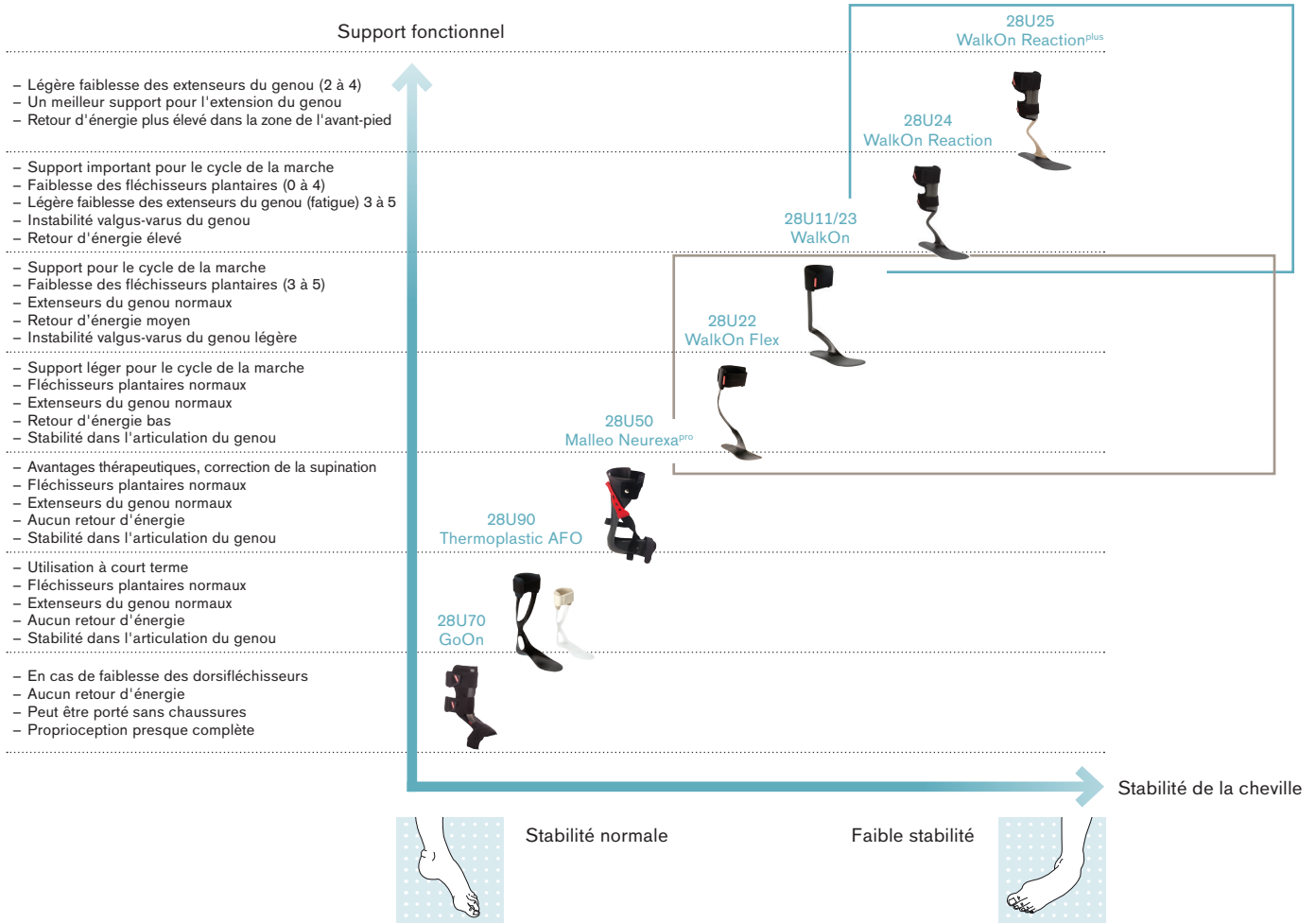

Support au cycle de la marche avec l'orthèse GoOn

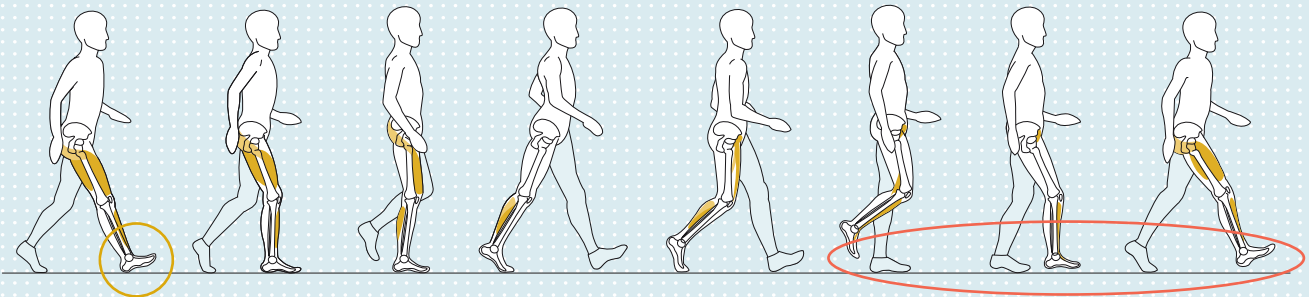

- Contrôle limité de la flexion plantaire
- Support à la dorsiflexion en position neutre pendant la phase d'oscillation

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez plus d'informations.

